

new art laboratories



**Catalogue
2015**

Tests de dépistage de stupéfiants

nal von minden Drug-Screen®

Tests de dépistage de stupéfiants

Tests rapides médicaux

Produits de laboratoire

Conseils et service

nal von minden

Votre partenaire du diagnostic professionnel

Compétent et innovant

Des produits de haute qualité et un excellent service ont permis à notre entreprise de se distinguer depuis plus de 30 ans. Présente sur le marché français depuis 2005, notre large gamme de produits innovants propose des tests rapides dans le domaine du dépistage de stupéfiants et du diagnostic médical. Nos produits sont certifiés selon les plus hauts standards de qualité et sont constamment améliorés. L'obtention de la certification ISO 13485 souligne notre philosophie de qualité. Nos produits sont systématiquement testés par notre laboratoire qualité au centre logistique de Moers.

nal von minden, un service et un suivi complets

Notre équipe internationale, répartie entre les sites de Regensburg, Moers et La Haye, conseille des clients de toute l'Europe et cherche constamment à améliorer la qualité de service de nal von minden. Nous proposons à nos clients un service complet comprenant conseillers qualifiés, conception personnalisée des tests, processus de commande simple et livraison rapide. Sur demande, nous vous rendrons visite personnellement afin de vous présenter nos produits.

Notre équipe dédiée au marché francophone, composée exclusivement de personnes dont le français est la langue maternelle, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



L'équipe managériale nal von minden GmbH
Sandra von Minden, Roland Meissner et Thomas Zander

Regensburg
Allemagne



Votre partenaire du diagnostic professionnel

nal von minden GmbH · Tests de dépistage de stupéfiants

Sommaire

4	nal von minden Drug-Screen Aperçu de nos brochures et principe du test	33	Tests salivaires 34 Tests salivaires Classic 36 Tests salivaires Advanced 37 Tests salivaires Integrated
8	Bandelettes et Multi-bandelettes 9 Bandelettes unitaires 11 Mode d'emploi et interprétation 12 Multi-bandelettes 16 Flacon de contrôle positif et négatif	38	Tests de substances solides 40 Mode d'emploi et interprétation
17	Cassettes et Multi-cassettes 18 Cassettes unitaires 19 Multi-cassettes 22 Mode d'emploi et interprétation	41	Drug-Screen Scanner RSS II Diagnostic rapide automatisé et traçabilité des résultats
23	Tests sanguins 25 Mode d'emploi et interprétation	44	Tests d'alcoolémie
26	Urine Cup 27 Urine Cup II - Key Cup 29 Urine Cup - No step Cup	46	Informations sur les stupéfiants et les médicaments
31	Contrôle des urines falsifiées Urin-Control-Stick-7	48	Conseils et services

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden

Aperçu de nos brochures

MEDICAL



NADAL®




Medical ELISA

STUPEFIANTS




**nal von minden
Drug-Screen®**

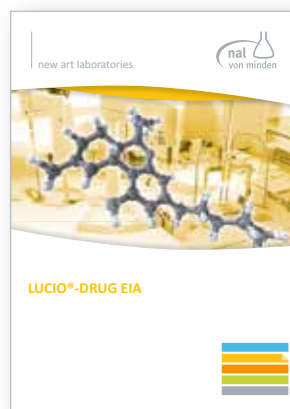

Drug EIA




**Drug-Screen Scanner
RSS II**

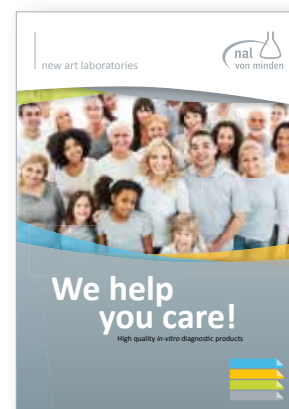

Présentation de l'entreprise

Principe du test

Descriptif de la bandelette

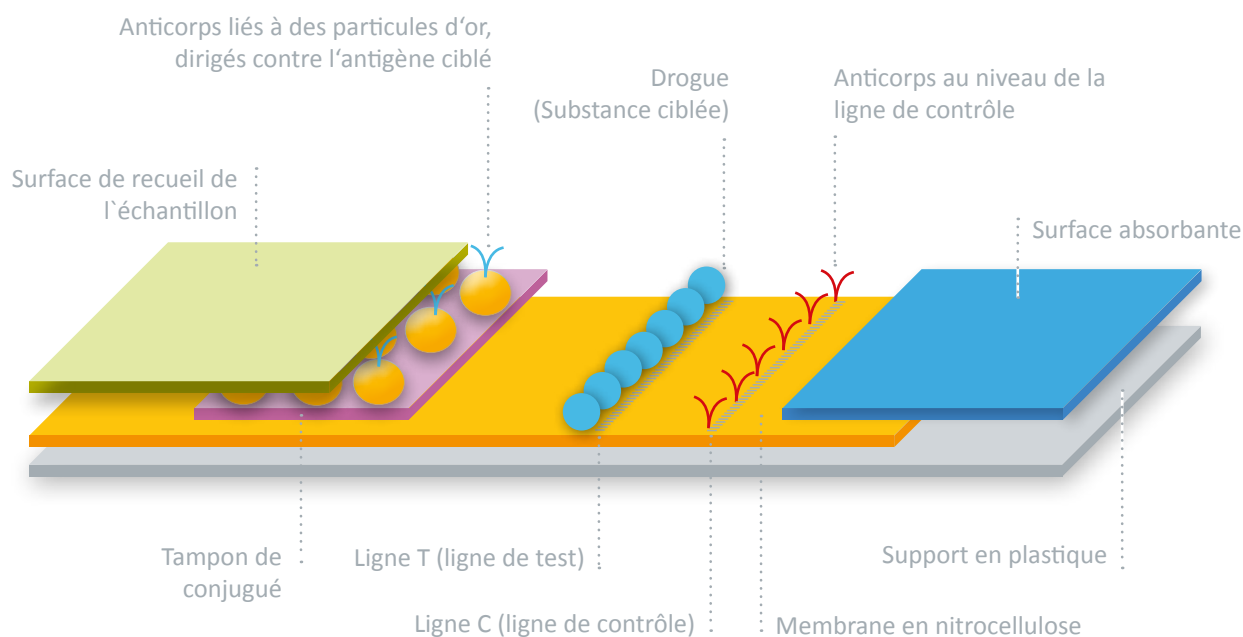

L'ensemble des tests rapides de la gamme nal von minden Drug Screen® est basé sur le même principe. L'échantillon collecté auprès du patient est mis en contact avec la surface de recueil et migre par capillarité le long de la bandelette.

En cas d'échantillon négatif, les conjugués anticorps-particules d'or se déplacent vers la zone de test où la substance ciblée (THC par exemple) est immobilisée. Les conjugués anticorps-particules d'or vont reconnaître et se lier à la substance ciblée immobilisée, entraînant ainsi l'apparition d'une ligne colorée dans la zone de test.

Dans le cas d'un d'échantillon positif, la drogue libre présente dans le prélèvement va se lier aux conjugués anticorps-particules d'or. Si la

concentration en drogue de l'échantillon collecté est plus élevée que le seuil de détection du test, l'ensemble des conjugués vont se lier à la drogue présente dans le prélèvement, empêchant alors leur liaison avec la drogue immobilisée dans la zone de test. Cela signifie qu'en cas d'échantillon positif, aucune ligne colorée n'apparaîtra dans la zone de test.

Dans tous les cas les conjugués vont se déplacer jusqu'à la zone de contrôle et se fixer à la membrane grâce aux anticorps. Ainsi les particules d'or vont toujours s'accumuler au niveau de la zone de contrôle et y entraîner l'apparition d'une ligne colorée rouge.

*Dr. rer. nat. Torsten Winkler
Manager Chef de produit - Diagnostic de laboratoire
nal von minden GmbH*

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen®

Tests de diagnostic professionnel

Dépistage de stupéfiants de haute qualité

Notre catalogue nal von minden Drug-Screen® vous donne des informations complètes concernant l'ensemble des produits proposés dans le domaine du dépistage de stupéfiants.

Notre gamme de produits comprend des tests rapides en différents formats : par absorption ou avec pipette, en unitaire ou en multi-test, ou encore avec béchers et bandelettes intégrées. Nos tests peuvent être réalisés à partir d'échantillon d'urine, de salive, de sang total, de sérum ou de plasma. Découvrez également le Drug-Screen Scanner RSS II qui vous permet une lecture automatisée de nos tests rapides, pour une meilleure traçabilité des résultats.

Au total, 30 paramètres de drogues et médicaments sont à disposition dont certains avec des seuils de

détection différents. Ainsi pour le paramètre THC (cannabis), nous vous proposons 5 seuils, du plus bas 25 ng/ml au plus élevé 500 ng/ml, en passant par le seuil standard de 50 ng/ml. Ce panel de seuils va vous permettre de différencier une consommation récente d'une consommation plus éloignée dans le temps et d'identifier les consommateurs occasionnels des consommateurs réguliers.

Plus de 6000 clients dans le monde, venant de plus de 40 pays, sont déjà pleinement satisfaits de nos produits. Parmi eux nous comptons des hôpitaux, des laboratoires d'analyses médicales, des centres de désintoxication, des services de police et de douane, des médecines du travail et des entreprises. Ces clients sont les garants de la qualité de nos produits ainsi que de la rapidité et la fiabilité de nos services.



Multi-X

			THC		AMP	MET		EDDP				
		BZD	THC	MTD	AMP		BUP	EDDP	BAR			
XTC	THC	TCA	MTD	MOR	MET	EDDP	COC		BUP	BAR	AMP	
AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MET	MOR	MTD	TCA	THC	XTC	
BAR	BZD	MOR	TCA	THC	XTC	COC	MTD	MET	BUP	AMP	EDDP	
THC	BUP	AMP	MET	EDDP	COC	MTD	TCA	BZD	MOR	XTC	BAR	
BZD	THC	COC	TCA	EDDP	MOR	AMP	XTC	MET	BUP	MTD	BAR	
TCA	MET	MTD	AMP	XTC	MOR	THC	COC	BAR	BUP	BZD	EDDP	
EDDP	BAR	XTC	MET	BZD	BUP	AMP	MOR	TCA	MTD	COC	THC	
BZD	MET	BAR	EDDP		AMP	MOR	MTD	BUP	TCA	XTC	COC	
	BZD	BAR	COC	MET	TCA	EDDP	AMP	MOR		MTD	XTC	
		MTD	THC					BZD			EDDP	

Un diagnostic adapté à chaque besoin

Découvrez nos multi-tests personnalisés

Vous n'avez pas trouvé votre combinaison de test avec les paramètres souhaités parmi notre gamme de 2500 références ? Nous avons la solution. Pour un minimum de 100 tests commandés nous vous assurons la production de votre multi-test au format Multi-bandelette, Multi-cassette ou Drug-Screen Cup.

Imaginez, des combinaisons de 2 à 12 paramètres, parmi 30 stupéfiants et médicaments : cela fait plus de 5,5 millions de versions possibles.

Nous ne voulons pas seulement vous satisfaire. Nous voulons vous inspirer.

- ✓ Combinaison personnalisée et adaptée à vos besoins
- ✓ Création de test à partir de 100 unités commandées
- ✓ Jusqu'à 12 paramètres sur votre multi-test
- ✓ 30 paramètres disponibles

N'hésitez pas à nous contacter pour créer votre test personnalisé

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services



nal von minden Drug-Screen® Bandelettes et Multi-bandelettes

Les tests rapides urinaires par absorption nal von minden Drug-Screen® indiquent en seulement 5 minutes un résultat fiable quant à la présence de stupéfiant dans l'urine d'un patient. La conformité avec la méthode de référence GC/MS se situe à 99 %. Nos tests ont une date de péremption de minimum 18 mois. Les bandelettes unitaires sont disponibles en emballage unitaire ou en tube. De plus, nous vous proposons une grande variété de tests Multi-bandelette,

permettant de détecter simultanément jusqu'à 12 paramètres. Un test personnalisé (avec paramètres et seuils de détection souhaités) peut être créé à partir d'une quantité minimum de 100 unités. En nouveauté, vous pouvez maintenant intégrer à votre multi-test un paramètre pour la détection de l'alcool (voir page 44) et pour le contrôle des urines falsifiées (voir pages 31/32). Les résultats obtenus à l'aide de tests Multi-bandelette peuvent être lus par notre lecteur Drug-Screen Scanner RSS II.



nal von minden Drug-Screen® Bandelettes et Multi-bandelettes

nal von minden Drug-Screen® Bandelettes, échantillon urinaire

Bandelettes unitaires, conditionnement en boîte de 50 bandelettes

Produit	Paramètre	Cut-off	Conditionnement	Référence
Alcool	ALC	0,2 ‰	50	101036
Amphétamine	AMP	1000 ng/ml	50	101001
	AMP 300	300 ng/ml	50	101016
	AMP 500	500 ng/ml	50	101022
Barbiturique	BAR	300 ng/ml	50	101002
Benzodiazépine	BZD	300 ng/ml	50	101003
	BZD 100	100 ng/ml	50	101031
	BZD 200	200 ng/ml	50	101025
Buprénorphine	BUP	10 ng/ml	50	101004
Cannabinoïde	THC	50 ng/ml	50	101012
	THC 25	25 ng/ml	50	101017
	THC 150	150 ng/ml	50	101023
	THC 200	200 ng/ml	50	101042
	THC 300	300 ng/ml	50	101038
	THC 500	500 ng/ml	50	101039
Cotinine	COT	200 ng/ml	50	101019
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml	50	101008
EDDP	EDDP	100 ng/ml	50	101021
Ethylglucuronide NOUVEAU	EtG	500 ng/ml	50	101062
Fentanyl	FYL	10 ng/ml	50	101029
Kétamine	KET	1000 ng/ml	50	101024
Cocaïne	COC	300 ng/ml	50	101005
	COC 100	100 ng/ml	50	101026
Créatinine	CREA	Semi-quant.	50	630001
MDA	MDA	500 ng/ml	50	101015
Méthadone	MTD	300 ng/ml	50	101006
Méthamphétamine	MET	1000 ng/ml	50	101007
	MET 300	300 ng/ml	50	101018
	MET 500	500 ng/ml	50	101020
Méthaqualone	MQL	300 ng/ml	50	101030
Méthylphénidate	MPD	300 ng/ml	50	101046
Opiacés / Morphine	MOR	300 ng/ml	50	101009
	MOR 100	100 ng/ml	50	101027
	MOR 2000	2000 ng/ml	50	101010
Oxycodon	OXY	100 ng/ml	50	101032
Paracétamol	PCM	5000 ng/ml	50	101034
Phencyclidine	PCP	25 ng/ml	50	101011
Propoxyphène	PPX	300 ng/ml	50	101014
Spice/K2 NOUVEAU	K2	50 ng/ml	50	101045
Tramadol	TML	100 ng/ml	50	101028
	TML 200	200 ng/ml	50	101043
Trazodon NOUVEAU	TZD	25 ng/ml	50	101047
Antidépresseur tricyclique	TCA 300	300 ng/ml	50	101041
	TCA 1000	1000 ng/ml	50	101013
Zaleplon NOUVEAU	ZAL	100 ng/ml	50	101049
Zolpidem	ZOL	50 ng/ml	50	101040

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Bandelettes, échantillon urinaire

Bandelette unitaire, conditionnement en tube de 25 bandelettes

Produit	Paramètre	Cut-off (ng/ml)	Conditionnement	Référence
Amphétamine	AMP	1000 ng/ml	25	620015
	AMP 300	300 ng/ml	25	620006
	AMP 500	500 ng/ml	25	620013
Barbiturique	BAR	300 ng/ml	25	620085
Benzodiazépine	BZD	300 ng/ml	25	620065
	BZD 100	100 ng/ml	25	105031
	BZD 200	200 ng/ml	25	620063
Buprénorphine	BUP	10 ng/ml	25	620150
Cannabinoïde	THC	50 ng/ml	25	620055
	THC 25	25 ng/ml	25	620054
	THC 150	150 ng/ml	25	620057
	THC 300	300 ng/ml	25	105038
	THC 500	500 ng/ml	25	105039
Cotinine	COT	200 ng/ml	25	620193
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml	25	620105
EDDP	EDDP	100 ng/ml	25	620160
Ethylglucuronide NOUVEAU	EtG	300 ng/ml	25	105044
Fentanyl	FYL	10 ng/ml	25	620190
Kétamine	KET	1000 ng/ml	25	620195
Cocaïne	COC	300 ng/ml	25	620045
	COC 100	100 ng/ml	25	620043
MDA	MDA	500 ng/ml	25	620103
Méthadone	MTD	300 ng/ml	25	620075
Méthamphétamine	MET	1000 ng/ml	25	620025
	MET 300	300 ng/ml	25	620007
	MET 500	500 ng/ml	25	620023
Méthaqualone	MQL	300 ng/ml	25	105030
Méthylphénidate	MPD	300 ng/ml	25	105046
Opiacés / Morphine	MOR	300 ng/ml	25	620035
	MOR 100	100 ng/ml	25	620033
	MOR 2000	2000 ng/ml	25	620037
Oxycodon	OXY	100 ng/ml	25	105032
Paracétamol	PCM	5000 ng/ml	25	105034
Phencyclidine	PCP	25 ng/ml	25	620108
Propoxyphène	PPX	300 ng/ml	25	620197
Spice/K2 NOUVEAU	K2	50 ng/ml	25	105045
Tramadol	TML	100 ng/ml	25	620170
Trazodon NOUVEAU	TZD	25 ng/ml	25	105047
Antidépresseur tricyclique	TCA	1000 ng/ml	25	620095
Zaleplon NOUVEAU	ZAL	100 ng/ml	25	105049
Zolpidem	ZOL	50 ng/ml	25	105040


nal von minden Drug-Screen® : mode d'emploi et interprétation

Mode d'emploi bandelette

- 1** Matériel nécessaire à l'emploi:
bandelette unitaire, récipient, échantillon
d'urine, gants



- 2** Sortir la bandelette et la plonger
15-30 secondes jusqu'à ce que
la zone de lecture se colore
entièrement d'un jaune pâle.
Veiller à ne pas immerger au-delà
de la ligne rouge.

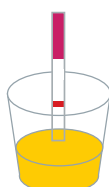

- 3** Poser la bandelette sur une surface
propre et plane.



- 4** Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus
interpréter les résultats après 10 minutes.




Mode d'emploi Multi-bandelette

- 1** Matériel nécessaire à l'emploi:
Multi-bandelette, récipient, échantillon
d'urine, gants



- 2** Sortir la multi-bandelette, enle-
ver le couvercle et plonger le test
15-30 secondes jusqu'à ce que les
zones de lecture se colorent entiè-
rement d'un jaune pâle. Le support
de la Multi-bandelette ne doit
pas entrer en contact avec l'urine.
Remettre le couvercle.

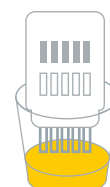

- 3** Poser la multi-bandelette sur une
surface propre et plane.




- 4** Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus
interpréter les résultats après 10 minutes.



Interprétation des résultats

Négatif:

Deux lignes apparaissent dans la
fenêtre de lecture. L'une représente la
ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne
de test (T) spécifique à chaque drogue.
Ce résultat négatif indique que la
quantité de drogue présente dans
cet échantillon est inférieure au
seuil de détection, voire totalement
absente. L'intensité de la ligne de
test peut varier.

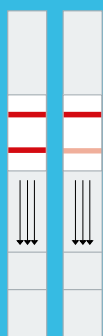

Positif:

Seule une
ligne rouge de
contrôle (C)
apparaît et
aucune ligne
de test (T) n'est
visible.



Non valide:

Aucune ligne
de contrôle
(C) n'apparaît.



nal von minden Drug-Screen® Multi-bandelette Descriptif d'un test Multi-bandelette



nal von minden Drug-Screen® Multi-bandelettes

Multi-bandelettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaïne	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-2															
Multi-2	AMP											THC			103020
Multi-2A				BZD					MOR						103021
Multi-2C												25,150			103023
Multi-2D				BZD								THC			103024
Multi-2E					COC				MOR						103025
Multi-3															
Multi-3				BZD	COC				MOR						620902
Multi-3A	AMP								MOR			THC			103037
Multi-3AC												50/150/300			103232
Multi-3AX												200/300/500			103031
Multi-3C			BUP						MOR	MTD					621002
Multi-3E	AMP				COC							THC			103030
Multi-3F	AMP				COC		MDMA								103136
Multi-3H					COC				MOR			THC			103038
Multi-3J				BZD					MOR			THC			103039
Multi-3K					COC				MOR	MTD					103034
Multi-3L					COC	EDDP			MOR						103130
Multi-3N		BAR			COC							THC			103132
Multi-3Q			BUP	BZD					MOR						103135
Multi-3R	AMP			BZD	COC										103134

nal von minden Drug-Screen® Multi-bandelettes

Multi-bandelettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaïne	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-4															
Multi-4A			BUP		COC				MOR			THC			103047
Multi-4AD	AMP			BZD	COC							THC			103240
Multi-4AF	AMP							MET	MOR			THC			103241
Multi-4B			BUP	BZD	COC				MOR						622502
Multi-4D	AMP				COC		MDMA					THC			103049
Multi-4E				BZD	COC	EDDP			MOR						622102
Multi-4EB			BUP	BZD		EDDP			MOR						622602
Multi-4G				BZD	COC				MOR			THC			103041
Multi-4K	AMP			BZD	COC				MOR						103044
Multi-4M				BZD	COC				MOR	MTD					630402
Multi-4P	AMP			BZD					MOR			THC			103141
Multi-4V	AMP				COC				MOR			THC			630002
Multi-4Z				100	100				100			25			103146
Multi-5															
Multi-5	AMP			BZD	COC				MOR			THC			620402
Multi-5A	AMP				COC			MET	MOR			THC			103052
Multi-5AH	AMP			BZD	COC			MET	MOR						103352
Multi-5AL	AMP				COC		MDMA	MET				THC			103355
Multi-5B	AMP		BUP	BZD	COC				MOR						621202
Multi-5C	AMP				COC		MDMA		MOR			THC			103054
Multi-5E	AMP			BZD	COC	EDDP			MOR						621702
Multi-5EB			BUP	BZD	COC	EDDP			MOR						622202
Multi-5F	AMP		BUP	BZD					MOR			THC			103058
Multi-5L		BAR		BZD				MET	MOR			THC			103157
Multi-5M	AMP			BZD	COC				MOR	MTD					620302
Multi-5MB			BUP	BZD	COC				MOR	MTD					621402
Multi-5N	AMP			BZD				MET	MOR			THC			103051
Multi-5P	AMP			BZD		EDDP			MOR			THC			103158
Multi-5S				BZD	COC				MOR	MTD		THC			630602
Multi-5SB			BUP	BZD	COC				MOR			THC			622702
Multi-5SE				BZD	COC	EDDP			MOR			THC			622302
Multi-5V			BUP	BZD					MOR				FYL, TML		103250
Multi-6															
Multi-6	AMP			BZD	COC				MOR	MTD		THC			620602
Multi-6A				BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			103160
Multi-6AC	AMP			BZD	COC				MOR			THC		ALC	103267
Multi-6AK	AMP			BZD	COC			500	MOR			THC			103364
Multi-6AL				BZD	COC	EDDP		MET	MOR					ALC	103365
Multi-6AX-AC-B													pH/Crea/Oxi		103464
Multi-6B	AMP			BZD	COC			MET	MOR			THC			640402
Multi-6C	300			BZD	COC				MOR	MTD		THC			103161
Multi-6D	AMP				COC		MDMA	MET	MOR			THC			103064
Multi-6E	AMP			BZD	COC	EDDP			MOR			THC			622402
Multi-6F	AMP				COC		MDMA		MOR	MTD		THC			103065

Cut-offs standards (ng/ml)

AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL	TML	KET	COT	MDA	PCP	PPX
1000	300	10	300	300	100	500	1000	300	300	1000	50	10	100	1000	200	500	25	300

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Multi-bandelettes

Multi-bandelettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaine	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-6															
Multi-6H			BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC			103068
Multi-6J			BUP		COC		MDMA		MOR	MTD		THC			103069
Multi-6K	AMP		BUP	BZD	COC				MOR			THC			103162
Multi-6L	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD					103062
Multi-6N	AMP		BUP		COC				MOR	MTD		THC			103163
Multi-6O	AMP			BZD	COC		MDMA		MOR			THC			103164
Multi-6P	AMP	BAR		BZD	COC				MOR			THC			103165
Multi-6R	AMP			BZD			MDMA	MET	MOR			THC			103167
Multi-6V	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP			MOR						103168
Multi-6X				BZD	COC	EDDP			MOR	MTD		THC			103262
Multi-7															
Multi-7	300			BZD	COC			300	MOR	MTD		THC			630802
Multi-7A	AMP			BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			103070
Multi-7AB	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP		MET	MOR						103271
Multi-7B	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC			103071
Multi-7C	AMP		BUP	BZD	COC			MET	MOR			THC			103072
Multi-7D	AMP		BUP		COC		MDMA	MET	MOR			THC			103073
Multi-7E	AMP		BUP		COC	EDDP		MET	MOR			THC			103075
Multi-7EB	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP			MOR			THC			621102
Multi-7F	AMP	BAR		BZD	COC	EDDP			MOR			THC			103076
Multi-7L	300			BZD	200			300	MOR	MTD		25			622002
Multi-7M			BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC		ALC	103171
Multi-7R	AMP	BAR		BZD	COC	EDDP			MOR				FYL		103175
Multi-7S	AMP			BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC			103176
Multi-7V			BUP	BZD	COC	EDDP		300	MOR			THC			622802
Multi-7W	AMP			BZD	COC			MET	MOR			THC		CREA	103177
Multi-7Y	AMP				COC		MDMA	MET	MOR			THC		Spice/K2	103178
Multi-7Z				BZD	COC		MDMA		MOR			THC	KET	ALC	103179
Multi-8															
Multi-8A	AMP	BAR		BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			103080
Multi-8B	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC			103081
Multi-8C	AMP		BUP	BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			103082
Multi-8D	300	BAR		BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC			103083
Multi-8E	300		BUP	BZD	COC			300	MOR			THC	TML		103086
Multi-8H	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA		MOR			THC			103087
Multi-8J	AMP	BAR	BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC			103088
Multi-8K	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD	TCA	THC			103089

Gratuits
Votre test personnalisé

Garantie d'échange

Pour chaque multi-test, nous vous offrons gratuitement béciers et gants.
A partir d'une quantité minimum de 100 unités, créez sans surcoût votre test personnalisé avec les paramètres choisis.

Dans le cas où vos tests auraient dépassé la date de péremption, nous échangeons vos tests périmés contre des nouveaux (voir conditions en page 51)

Cut-offs standards (ng/ml)

AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL	TML	KET	COT	MDA	PCP	PPX
1000	300	10	300	300	100	500	1000	300	300	1000	50	10	100	1000	200	500	25	300

nal von minden Drug-Screen® Multi-bandelettes

Multi-bandelettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaine	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-8															
Multi-8L	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC		hCG 20mIU/ml	103180
Multi-8M	300		BUP	100	100			300	100	MTD		25			103181
Multi-8N	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP			MOR			THC		pH/Crea	103182
Multi-8Q	500				COC		500	500	MOR	MTD		THC		pH/Crea	103184
Multi-8R	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC		ALC	103185
Multi-8S	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC	KET		103186
Multi-8U	300		BUP	BZD				300	MOR			THC	TML	Spice/K2	103187
Multi-8V	AMP			BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC		ALC	103188
Multi-8Y	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP			MOR			THC		pH/Crea/Oxi	103189
Multi-9															
Multi-9B	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC			103093
Multi-9C	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP		MET	MOR	MTD		THC			103092
Multi-9D	500		BUP		COC		MDMA	500	MOR	MTD		THC		PH, KREA	103095
Multi-9F	AMP		BUP	BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC	TML		103096
Multi-9H	AMP			BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC	TML		103098
Multi-9M	AMP	BAR	BUP	BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			103094
Multi-10															
Multi-10A	AMP	BAR		BZD	COC			MET	MOR	MTD	TCA	THC		PCP	103100
Multi-10AB	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC	TML		103115
Multi-10AC	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	25			103116
Multi-10AH	300		BUP	BZD		EDDP		300	MOR			25	FYL/TML	OXY	103310
Multi-10AK	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR			THC	FYL		103410
Multi-10AO	300	BAR	BUP	200	COC		MDMA		MOR		TCA	THC	FYL		103414
Multi-10AQ	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR		TCA	THC		Spice/K2	103416
Multi-10AR	300		BUP	BZD	COC			300	MOR	MTD		THC	FYL/TML		103417
Multi-10B	AMP	BAR	BUP	BZD	COC			MET	MOR	MTD	TCA	THC			103103
Multi-10C	AMP	BAR		BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR		TCA	THC			103105
Multi-10D	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA		MOR	MTD	TCA	THC			103106
Multi-10E	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			620802
Multi-10G	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR		TCA	THC			103108
Multi-10H	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC		PPX	103109
Multi-10J	AMP		BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			103104
Multi-10K	AMP		BUP	BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC	FYL, TML		103121
Multi-10L	300	BAR	BUP	BZD	COC			300	MOR	MTD	TCA	THC			621802
Multi-10N	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC			103120
Multi-10P	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD		THC			103122
Multi-10R	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR		TCA	THC	TML		103124
Multi-10S	300		BUP	BZD	COC	EDDP		300	MOR			THC	FYL	CREA, PH	103125
Multi-10U	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC		MOR2000	103126
Multi-10Y	300		BUP	BZD	COC	EDDP		300	MOR			25	FYL	CREA, PH	103113
Multi-10Z	300		BUP	200	COC		MDMA	300	MOR	MTD		THC		OXY	103114
Multi-11															
Multi-11	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			103112
Multi-12															
Multi-12A	300	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	300	MOR	MTD	TCA	THC	TML		103123
Multi-12B	300		BUP	200	COC	EDDP	MDMA	300	MOR	MTD		THC	TML	PPX	103128
Multi-12C	300		BUP	BZD	COC		MDMA	300	MOR	MTD		THC	FYL, TML	OXY100	103129
Multi-12E	AMP	BAR		BZD	COC			MET	MOR	MTD	TCA	THC	KET	PCP, PCM	103211
Multi-12G	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC	KET	CREA	103213

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Flacon de contrôle pour tests de dépistage de stupéfiants

Dans le cadre d'une accréditation des techniques d'analyses ou d'un contrôle qualité externe, le laboratoire peut avoir besoin d'un outil validant la procédure utilisée.

Les contrôles positif et négatif Drug-Screen Stat-Screen vous permettent de vérifier la fiabilité et la

performance de l'ensemble de nos tests rapides de dépistage de stupéfiants dans les urines.

Vous pouvez ainsi effectuer vous-même à tout moment un contrôle ponctuel ou mettre en place une procédure de contrôle à chaque réception d'un nouveau lot de tests.

Conditionnement en flacon de 5ml

Contient en ng/ml	Paramètre	Contrôle positif +50% Réf.1020045	Contrôle positif +100% Réf.1020048	Contrôle négatif Réf.1020095
Delta-9-THC-COOH	THC	75	100	0
Benzoylécgonine (Cocaïne)	COC	450	600	0
Phencyclidine	PCP	37,5	50	0
Morphine	MOR/OPI	450	600	0
d-Amphétamine	AMP	1500	2000	0
d-Methamphetamine	MET	1500	2000	0
Secobarbital (Barbiturique)	BAR	450	600	0
Oxazepam (Benzodiazépine)	BZD	450	600	0
Méthadone	MTD	450	600	0
Méthqualone	MQL	450	600	0
Propoxyphène	PPX	450	600	0
Nortriptyline (Antidépresseur tricyclique)	TCA	1500	2000	0
MDMA	MDMA	-	1000	0
Oxycodon	OXY	-	200	0
Buprénorphine	BUP	-	20	0



nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Cassettes et Multi-cassettes

Les tests rapides urinaires nal von minden Drug-Screen® indiquent en seulement 5 minutes un résultat fiable quant à la présence de drogues dans l'urine d'un patient. Seule une petite quantité d'urine (3 gouttes) est nécessaire à l'exécution du test cassette. Une pipette est fournie avec chaque test et rend la manipulation du test plus hygiénique. La conformité avec la méthode de référence GC/MS se situe à 99 %. Chaque cassette a une date de péremption de minimum 18 mois. De plus, à travers un choix de 28 paramètres disponibles, nous

proposons des tests multi-cassette permettant de détecter simultanément jusqu'à 12 paramètres. Un test personnalisé (avec paramètres et seuils de détection souhaités) peut être créé à partir d'une quantité minimum de 100 unités. En nouveauté, vous pouvez maintenant intégrer à votre multi-test un paramètre pour la détection de l'alcool (voir page 44) et pour le contrôle des urines (voir pages 31/32). Tous les résultats obtenus à l'aide de tests cassettes et multi-cassette peuvent être lus par notre lecteur Drug-Screen Scanner RSS II.



Cassette unitaire



- > Résultat en 1 - 5 minutes
- > Seulement trois gouttes d'urine nécessaire
- > Conforme à 99% avec la méthode de référence GC/MS
- > Durée de péremption des tests 18 mois minimum
- > Certification CE


nal von minden Drug-Screen® Cassettes, échantillon urinaire

Cassettes unitaires, conditionnement en boîte de 30 tests

Produit	Paramètre	Cut-off (ng/ml)	Conditionnement	Référence
Amphétamine	AMP	1000 ng/ml	30 cassettes	102001
	AMP 300	300 ng/ml	30 cassettes	102016
	AMP 500	500 ng/ml	30 cassettes	102022
Barbiturique	BAR	300 ng/ml	30 cassettes	102002
Benzodiazépine	BZD	300 ng/ml	30 cassettes	102003
	BZD 100	100 ng/ml	30 cassettes	102031
	BZD 200	200 ng/ml	30 cassettes	102025
Buprénorphine	BUP	10 ng/ml	30 cassettes	102004
Cannabinoïde	THC	50 ng/ml	30 cassettes	102012
	THC 25	25 ng/ml	30 cassettes	102017
	THC 150	150 ng/ml	30 cassettes	102023
	THC 300	300 ng/ml	30 cassettes	102038
	THC 500	500 ng/ml	30 cassettes	102039
Cotinine	COT	200 ng/ml	30 cassettes	102019
Ecstasy	MDMA	500 ng/ml	30 cassettes	102008
EDDP	EDDP	100 ng/ml	30 cassettes	102021
Ethylglucuronide NOUVEAU	EtG	500 ng/ml	30 cassettes	102062
Fentanyl	FYL	10 ng/ml	30 cassettes	102029
Kétamine	KET	1000 ng/ml	30 cassettes	102024
Cocaïne	COC	300 ng/ml	30 cassettes	102005
	COC 100	100 ng/ml	30 cassettes	102026
MDA	MDA	500 ng/ml	30 cassettes	102015
Méthadone	MTD	300 ng/ml	30 cassettes	102006
Méthamphétamine	MET	1000 ng/ml	30 cassettes	102007
	MET 300	300 ng/ml	30 cassettes	102018
	MET 500	500 ng/ml	30 cassettes	102020
Méthaqualone	MQL	300 ng/ml	30 cassettes	102030
Méthylphénidate	MPD	300 ng/ml	30 cassettes	102046
Opiacés / Morphine	MOR	300 ng/ml	30 cassettes	102009
	MOR 100	100 ng/ml	30 cassettes	102027
	MOR 2000	2000 ng/ml	30 cassettes	102010
Oxycodon	OXY	100 ng/ml	30 cassettes	102032
Paracétamol	PCM	5000 ng/ml	30 cassettes	102034
Phencyclidine	PCP	25 ng/ml	30 cassettes	102011
Propoxyphène	PPX	300 ng/ml	30 cassettes	102014
Spice/K2 NOUVEAU	K2	50 ng/ml	30 cassettes	102045
Tramadol	TML	100 ng/ml	30 cassettes	102028
Trazodon NOUVEAU	TZD	25 ng/ml	30 cassettes	102047
Antidépresseur tricyclique	TCA	1000 ng/ml	30 cassettes	102013
Zaleplon NOUVEAU	ZAL	100 ng/ml	30 cassettes	102049
Zolpidem	ZOL	50 ng/ml	30 cassettes	102040

nal von minden Drug-Screen® Multi-cassettes

Descriptif d'un test Multi-cassette

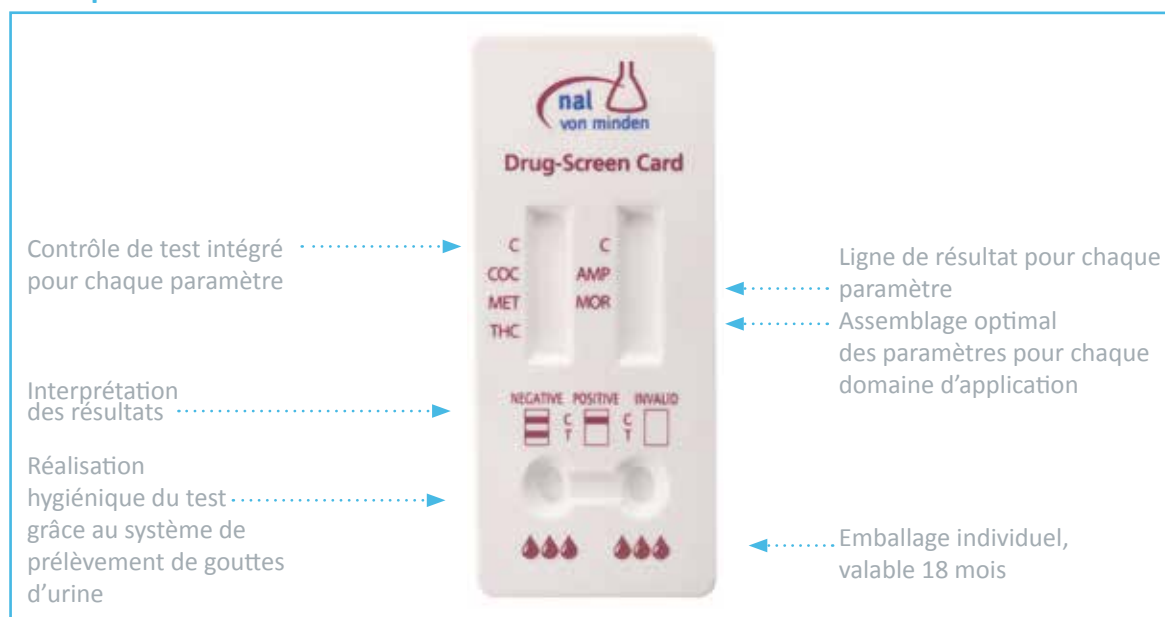

nal von minden Drug-Screen® Multi-cassettes

Multi-cassettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaine	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-2T															
Multi-2TA					COC							THC			104020
Multi-2TF						EDDP			MOR						104024
Multi-2TG				BZD					MOR						104025
Multi-2TD												25/150			104156
Multi-3T															
Multi-3T				BZD	COC				MOR						623002
Multi-3TC		BAR		BZD							TCA				104032
Multi-3TD					COC				MOR			THC			104033
Multi-3TG												25/50/150			104037
Multi-3TH			BUP			EDDP				MTD					104038
Multi-3T				BZD	COC				MOR						623002
Multi-3TK			BUP	BZD					MOR						104130
Multi-3TL				BZD					MOR			THC			104131
Multi-3TM					COC	EDDP						THC			104132
Multi-3TR	AMP				COC				MOR						104136
Multi-4T															
Multi-4T				BZD	COC				MOR			THC			630302
Multi-4TA				BZD	COC				MOR	MTD					104044
Multi-4TB					COC			MET	MOR			THC			104045
Multi-4TD	AMP				COC				MOR			THC			104040
Multi-4TE	AMP				COC			MET	MOR						104041
Multi-4TF					COC				MOR	MTD		THC			104046
Multi-4TH	500				COC				MOR						104048

Cut-offs standards (ng/ml)

AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL	TML	KET	COT	MDA	PCP	PPX
1000	300	10	300	300	100	500	1000	300	300	1000	50	10	100	1000	200	500	25	300

nal von minden Drug-Screen® Multi-cassettes

Multi-cassettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaïne	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-5T															
Multi-5T	300				COC			300	MOR			THC			640002
Multi-5TA	AMP		BUP	BZD	COC				MOR						104150
Multi-5TB				BZD	COC				MOR	MTD		THC			104151
Multi-5TC	AMP			BZD	COC	EDDP			MOR						104152
Multi-5TD	AMP				COC			MET	MOR			THC			104050
Multi-5TK	500				COC			500	2000			150			104059
Multi-5TM	AMP				COC			MET	MOR	MTD					104051
Multi-5TU			BUP	BZD	COC					MTD		THC			104157
Multi-5TV			BUP			EDDP	MDMA						TML	PPX	104158
Multi-5TW							MDMA				TCA			MDA/MOL/PCP	104159
Multi-6T															
Multi-6T	300			BZD	COC	EDDP			MOR			THC			640302
Multi-6TA	AMP			BZD	COC				MOR	MTD		THC			104060
Multi-6TB	300		BUP	BZD	COC				MOR			THC			640802
Multi-6TC	AMP				COC		MDMA	MET	MOR			THC			104061
Multi-6TD	AMP			BZD	COC			MET	MOR			THC			104062
Multi-6TF	AMP				COC			MET	MOR	MTD		THC			104064
Multi-6TG	AMP			BZD	COC		MDMA		MOR			THC			104065
Multi-6TH	AMP				COC		MDMA	MET	MOR	MTD					104066
Multi-6TI					COC				MOR	MTD		THC	TML	PCP	104067
Multi-6TK	AMP				COC			MET	MOR			50,150			104069
Multi-6TL	AMP		BUP	BZD		EDDP		MET	MOR						104160
Multi-6TP	300		BUP	BZD				MET	MOR			THC			104163
Multi-6TR	300				100		MDMA	300	MOR/OPI100			25			104164
Multi-6TS	AMP			BZD	COC	EDDP			MOR/OPI100					ph/Crea	104165
Multi-7T															
Multi-7TA	AMP		BUP	BZD	COC				MOR	MTD		THC			104070
Multi-7TC	AMP			BZD	COC			MET	MOR	MTD		THC			104072
Multi-7TF	500				COC		MDMA	500	MOR	MTD		THC			104075
Multi-7TG	AMP			BZD	COC	EDDP		MET	MOR	MTD					104076
Multi-7TJ	AMP			200	COC		MDMA	MET	MOR			THC			104078
Multi-7TK	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP			MOR			THC			104170
Multi-7TL	AMP		BUP		COC			MET	MOR	MTD		THC			104079
Multi-7TN	300	BAR		100	100		MDMA		MOR/OPI100			25			104172
Multi-7TR	500			BZD	COC	EDDP		500	MOR			150			104175
Multi-7TS			BUP	BZD	COC	EDDP			MOR	MTD		THC			104176
Multi-8T															
Multi-8TB	AMP	BAR		BZD	COC				MOR	MTD	TCA	THC			104081
Multi-8TD	AMP	BAR	BUP		COC		MDMA		MOR	MTD		THC			104084
Multi-8TE	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA		MOR	MTD		THC			104085
Multi-8TG	AMP		BUP		COC		MDMA		MOR	MTD		THC			104087

nal von minden Drug-Screen® Multi-cassettes

Multi-cassettes, conditionnement en boîte de 25 tests

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaïne	EDDP	Ecstasy/MDMA	Méthamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Fentanyl, Tramadol, Kétamine	Autres Paramètres	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL, TML, KET		
Multi-9T															
Multi-9TB	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA		MOR	MTD	TCA	THC			104091
Multi-9TF	AMP			BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD		THC			104095
Multi-10T															
Multi-10TC	AMP	BAR		BZD	COC			MET	MOR	MTD	TCA	THC		PCP	104100
Multi-10TD	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			104101
Multi-10TE	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR		TCA	THC	TML		104105
Multi-10TF	300	BAR		200	100	EDDP	MDMA	500	MOR	MTD		THC			104106
Multi-10TH	AMP		BUP	BZD	COC	EDDP		300	MOR			THC	FYL/TML		104108
Multi-10TI	300		BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	300	MOR		1000	THC			104117
Multi-11T															
Multi-11T	300	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	300	MOR	MTD	TCA	THC			640702
Multi-11TA	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			104110
Multi-11TB	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC		COT	104111
Multi-11TC	300	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	300	MOR		TCA	THC			104112
Multi-11TE	AMP		BUP		COC		MDMA	MET	MOR	MTD		THC	KET/TML	PCM	104114
Multi-11TH	AMP			BZD	COC		MDMA		MOR	MTD			TML/ZOL	OXY/PCM	104116
Multi-12T															
Multi-12T	AMP	BAR		BZD	COC		MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC		MOR ^{base} PCP	104120
Multi-12TB	AMP	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	MET	2000	MTD	TCA	THC		PCP	104122
Multi-12TC	300	BAR	BUP	200	100		MDMA	300	100	MTD	TCA	THC		PCP	104123
Multi-12TD	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC			104124
Multi-12TE	300	BAR	BUP	BZD	COC		MDMA	300	MOR	MTD	TCA	THC	FYL		104125
Multi-12TF	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR		TCA	THC		pH/Crea	104126

Cut-offs standards (ng/ml)

AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	FYL	TML	KET	COT	MDA	PCP	PPX
1000	300	10	300	300	100	500	1000	300	300	1000	50	10	100	1000	200	500	25	300

Gratuits

Pour chaque multi-test, nous vous offrons gratuitement béciers et gants.

Votre test personnalisé

A partir d'une quantité minimum de 100 unités, créez sans surcoût votre test personnalisé avec les paramètres choisis.

Garantie d'échange

Dans le cas où vos tests auraient dépassé la date de péremption, nous échangeons vos tests périmés contre des nouveaux (voir conditions en page 51).

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services


nal von minden Drug-Screen® : mode d'emploi et interprétation

Mode d'emploi : cassettes

- 1** Matériel nécessaire à l'emploi: cassette unitaire, pipette, récipient, gants, échantillon d'urine



- 2** Sortir la cassette et la poser sur une surface propre et plane. A l'aide de la pipette déposer 3 gouttes d'urine (environ 180 µl) dans l'ouverture (S) de la cassette.

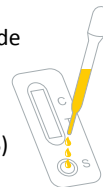

- 3** Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.



5 minutes

Interprétation des résultats

Négatif:

Deux lignes apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) spécifique à chaque drogue. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.



Positif:

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'est visible.



Non valide:

Aucune ligne de contrôle n'apparaît.



Mode d'emploi : Multi-cassettes

- 1** Matériel nécessaire à l'emploi: multi-cassette, pipette, récipient, gants, échantillon d'urine



- 2** Sortir la multi-cassette et la poser sur une surface propre et plane. A l'aide de la pipette déposer 3 gouttes d'urine (environ 180µl) dans l'ouverture (S) de la cassette.



- 3** Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 10 minutes.



5 minutes

Interprétation des résultats


Négatif:

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) spécifique à chaque drogue. Ce résultat indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.



Positif:

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'est visible.

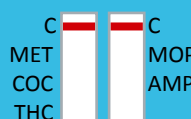

Positif seulement pour COC: dans cet exemple, seul le paramètre COC est positif.



Non valide:

Aucune ligne de contrôle n'apparaît.





nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Tests sanguins

Les tests rapides sanguins nal von minden Drug-Screen® peuvent être réalisés sur échantillons de sérum, plasma, sang capillaire et sang total veineux. Les seuils de détection ont été choisis de façon à pouvoir différencier la présence actuelle de drogue, de leur métabolite pouvant être détectés

plus tardivement (mais n'étant plus psychoactifs). Ils permettent ainsi un diagnostic de différenciation. Ces tests sanguins, de part la nature de l'échantillon testé, sont particulièrement adaptés aux situations d'urgence ou aux analyses post-mortem.



nal von minden Drug-Screen® Tests sanguins

Le test Drug-Screen sanguin est un test immunologique pour la détection rapide et qualitative des drogues et médicaments dans le sang total, plasma et sérum.



- > Résultats fiables à 99%
- > Manipulation facile
- > Seulement trois gouttes de sang, sérum ou plasma
- > Durée de péremption des tests: 18 mois minimum
- > Flacons de contrôle et solution de dilution disponibles

nal von minden Drug-Screen® Tests sanguins Cassette

Cassette unitaire, conditionnement en boîte de 30 tests

Produit	Paramètre	Cut-offs	Référence
Drug-Screen Amphétamine - sanguin	AMP50	50 ng/ml	106016
Drug-Screen Barbiturique - sanguin	BAR100	100 ng/ml	106002
Drug-Screen Benzodiazépine - sanguin	BZD100	100 ng/ml	106003
Drug-Screen Buprénorphine - sanguin	BUP5	5 ng/ml	106004
Drug-Screen Cannabinoïde - sanguin	THC12	12 ng/ml	106017
Drug-Screen Kétamine - sanguin	KET50	50 ng/ml	106024
Drug-Screen Cocaïne - sanguin	COC50	50 ng/ml	106005
Drug-Screen MDMA - sanguin	MDMA50	50 ng/ml	106008
Drug-Screen Méthadone - sanguin	MTD50	50 ng/ml	106006
Drug-Screen Métamphétamine - sanguin	MET50	50 ng/ml	106018
Drug-Screen Opiacés/Morphine - sanguin	MOR40	40 ng/ml	106009
Drug-Screen Paracétamol - sanguin	PCM100	100 ng/ml	106000
Drug-screen Antidépresseur tricyclique - sanguin	TCA300	300 ng/ml	106013
Solution de dilution - 3 ml	–	–	106099
Medidrug Contrôle sang total bas - 2,5 ml	–	–	1020096
Medidrug Contrôle sang total haut - 2,5 ml	–	–	1020097


nal von minden Drug-Screen® Tests sanguins Multi-cassette

Multi-cassette, conditionnement en boîte de 25 tests.

Produit	Amphétamine	Barbiturique	Buprénorphine	Benzodiazépine	Cocaïne	EDDP	Ecstasy/MDMA	Métamphétamine	Opiacés/Morphine	Méthadone	Antidépresseur tricyclique	Cannabinoïde	Référence
	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	TCA	THC	
Multi-XA													
Multi-3XA		100		100							300		1110030
Multi-5XA	50				50			50	40			12	1110050
Multi-8XA	50	100		100	50			50	40		300	12	1110080
Multi-XXA	Test sanguin Multi-cassette personnalisé, combinaison de 2 à 8 paramètres												111XXXX

nal von minden Drug-Screen® Tests sanguins : mode d'emploi et interprétation




Mode d'emploi - Échantillon de sérum / ponction veineuse

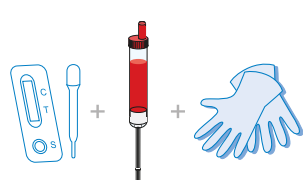- 1 Matériel nécessaire à l'emploi: cassette, pipette, échantillon de sérum/sang, gants

- 2 Sortir la cassette et la poser sur une surface propre et plane. A l'aide de la pipette déposer 3 gouttes de sang (environ 120 µl) dans le puits de dépôt (S) de la cassette.

- 3 Lire le résultat après 10-20 minutes.


10-20 Minutes

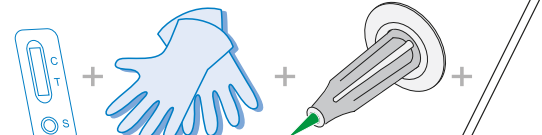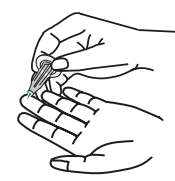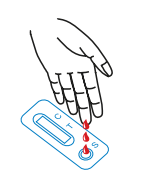Mode d'emploi - Échantillon de sang capillaire

- 1 Matériel nécessaire à l'emploi : cassette unitaire, pipette, lancette, gants

- 2 Piquer le doigt à l'aide de la lancette et prélever le sang à l'aide d'une pipette capillaire après avoir pris soin de désinfecter la zone de ponction. Eviter la formation de bulles d'air.

- 3 Sortir la cassette et la poser sur une surface propre et plane.
Faire tomber 3 gouttes de sang (environ 120 µl) directement du doigt dans le puits de dépôt (S) de la cassette.


OU
A l'aide du tube capillaire déposer le sang (3 gouttes, soit env. 120 µl) dans le puits (S) de la cassette.

- 4 Lire le résultat après 10-20 minutes.


10-20 Minutes

Interprétation des résultats

Négatif:

Deux lignes apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) spécifique à chaque drogue. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.



Positif:

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'est visible.



Non valide:

Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.





nal von minden Drug-Screen® Cup

Pour un dépistage plus hygiénique et simplifié, nal von minden vous propose son Drug-Screen® Cup II, un test tout en un, avec béc

l'analyse. A partir d'une quantité minimum de 100 unités, vous avez la possibilité de personnaliser votre test en choisissant une combinaison de 2 à 12 paramètres (incluant également créatinine et le pH) parmi nos 28 paramètres disponibles.

nal von minden Drug-Screen® Cup II - Key Cup

Bécher avec bandelettes intégrées, pour la détection de drogues et de leurs métabolites dans l'urine.



- > Interprétation et lecture facile
- > Thermomètre inclus sur le bécher
- > Format adapté en cas d'envoi en laboratoire pour analyse de confirmation
- > Conservation à température ambiante
- > Résultats précis et fiables en 1 à 5 minutes
- > Date de péremption de 18 mois minimum
- > Séparation hermétique entre la zone de test et le bécher contenant l'urine. Test à déclenchement différé : l'analyse ne commence que lorsque la clé est actionnée.

nal von minden Drug-Screen Cup II - Key cup

Conditionnement en boîte de 25 tests

Référence	Produit	Paramètre
910042	Drug-Screen-Cup II 4C (urine)	BZD, COC, MOR, MTD
910050	Drug-Screen-Cup II 5A (urine)	AMP, BZD, COC, MOR, THC
910051	Drug-Screen-Cup II 5B (urine)	AMP, COC, MET, MOR, THC
910054	Drug-Screen-Cup II 5D (urine)	BUP, BZD, COC, MOR, THC
910060	Drug-Screen-Cup II 6A (urine)	AMP, BZD, COC, MOR, MTD, THC
910062	Drug-Screen-Cup II 6C (urine)	BUP, BZD, COC, MOR, MTD, THC
910067	Drug-Screen-Cup II 6G (urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MOR, MTD
910068	Drug-Screen-Cup II 6H (urine)	BUP, BZD, COC, EDDP, MOR, THC
910070	Drug-Screen-Cup II 7A (urine)	AMP, BZD, COC, MET, MOR, MTD, THC
910072	Drug-Screen-Cup II 7C (urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MDMA, MOR + CREA
910073	Drug-Screen-Cup II 7D (urine)	AMP, BZD, COC, EDDP, MDMA, MOR + CREA
910080	Drug-Screen-Cup II 8A (urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MOR, MTD, THC, TCA
910081	Drug-Screen-Cup II 8B (urine)	AMP, BZD, COC, EDDP, MDMA, MOR, THC + CREA
910082	Drug-Screen-Cup II 8C (urine)	AMP500, COC, MDMA, MET500, MOR, MTD, THC + CREA, pH
910091	Drug-Screen-Cup II 9B (urine)	AMP500, BUP, COC, MET500, MDMA, MOR, MTD, THC + CREA, pH
910092	Drug-Screen-Cup II 9C (urine)	AMP, BAR, BUP, BZD, COC, MDMA, MOR, MTD, THC
910093	Drug-Screen-Cup II 9D (urine)	AMP, BZD, BUP, COC, EDDP, MET, MOR, MTD, THC + Adulteration A (ph, oxydant, densité)
910101	Drug-Screen-Cup II 10B (urine)	AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR, MTD, TCA, THC
910102	Drug-Screen-Cup II 10C (urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MDMA, MET, MOR, MTD, TCA, THC
910103	Drug-Screen-Cup II 10A (urine)	AMP, BAR, BUP, BZD, COC, EDDP, MDMA, MOR, TCA, THC
910120	Drug-Screen-Cup II 12A (urine)	AMP, BAR200, BZD200, BUP, COC, MDMA, MET300, MTD250, MOR, PCP, TML, THC25 + CREA, Oxydant

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides


Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Mode d'emploi - Drug-Screen® Cup II


- 1 Amener les tests, échantillons d'urine et/ou contrôles à température ambiante (15-30°C) avant leur utilisation.
- 2 Sortir le récipient avec sa clé du sachet scellé et l'utiliser aussitôt que possible.
- 3 Le patient fournit un échantillon d'urine dans le récipient et visse le couvercle dessus par la suite.
- 4 L'utilisateur vérifie que le couvercle est correctement vissé.
- 5 L'utilisateur indique les données du patient et ses initiales sur l'étiquette munie d'un thermomètre (face avant).
- 6 L'utilisateur insère la clé dans l'ouverture prévue à cet effet. Le manche de la clé doit être aligné à la verticale, la partie la plus large orientée vers le haut (voir illustration). L'utilisateur tourne la clé dans le sens des aiguilles d'une montre à 180° et démarre immédiatement le chronomètre. Ne pas retirer la clé après le déclenchement du test.
- 7 Retirer l'étiquette détachable.
- 8 Lire la bandelette de température après 4 minutes. Une couleur verte apparaît pour indiquer la température de l'échantillon d'urine. La température correcte pour un échantillon d'urine non adultéré est située entre 32°C et 38°C (90-100°F).
- 9 Lire le résultat du test après 1-5 minutes. Ne plus interpréter les résultats apparaissant après 10 minutes. Les résultats positifs doivent être confirmés par une autre méthode. Envoyer le récipient avec l'échantillon d'urine à un laboratoire de toxicologie pour confirmation.

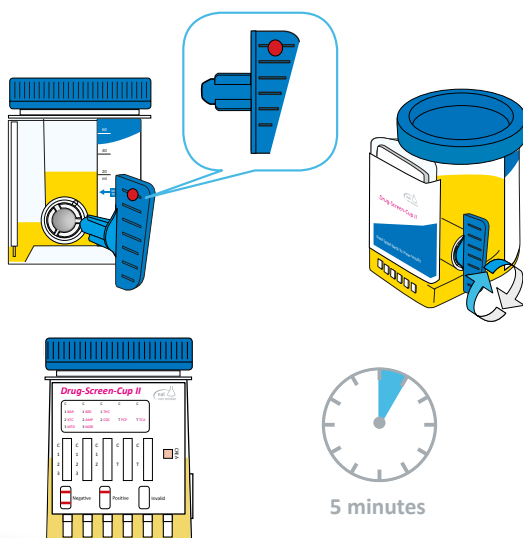

Interprétation des résultats


Négatif:

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) spécifique à chaque drogue. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.

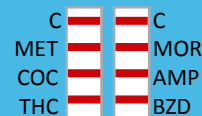

Positif:

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'est visible.

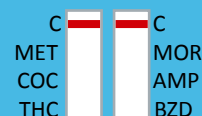


Positif seulement pour COC: Dans cet exemple, seul le paramètre COC est positif.



Non valide

Aucune ligne de contrôle (C) apparaît.

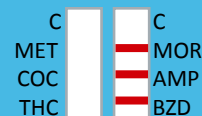

Les paramètres de contrôle des urines falsifiées suivants (voir pages 31/32) sont intégrables au test nal von minden Drug-Screen® Cup II - Key Cup :

- > Agents oxydants
- > Glutaraldéhyde
- > Densité
- > Nitrite
- > pH
- > Créatinine

nal von minden Drug-Screen® Cup - No step Cup

Bécher avec bandelettes intégrées, pour la détection de drogues et de leurs métabolites dans l'urine

Le nouveau test nal von minden Drug-Screen® Cup - No step Cup a la particularité de présenter une fenêtre de résultats aplatie, ce qui permet un archivage des résultats par numérisation ou photocopie. Ce test n'a pas de clé de démarrage et commence immédiatement après l'introduction de l'échantillon d'urine dans le bécher. Une personnalisation avec les paramètres de votre choix est possible pour une quantité minimum de 100 tests commandés.

Les paramètres de contrôle des urines falsifiées (voir pages 31/32) suivants sont intégrables au test nal von minden Drug-Screen® Cup - No step Cup:

- > pH
- > Densité
- > Créatinine
- > Agents oxydants
- > Glutaraldéhyde
- > Nitrite



- > Combinaison jusqu'à 12 paramètres au choix
- > Thermomètre inclus sur le bécher
- > Test adapté à la numérisation et à la photocopie des résultats
- > Test à déclenchement immédiat : l'analyse commence lorsque l'urine est introduite dans le bécher

nal von minden Drug-Screen® Cup - No step cup

Conditionnement en boîte de 25 tests

Référence	Produit	Paramètre
830033	Drug-Screen-Cup 3CA (Urine)	BZD, MOR/OPI, MTD
830042	Drug-Screen-Cup 4CA (Urine)	BZD, COC, MOR/OPI, MTD
830050	Drug-Screen-Cup 5CA (Urine)	AMP, BZD, COC, MOR/OPI, THC
830060	Drug-Screen-Cup 6CA (Urine)	AMP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC
830061	Drug-Screen-Cup 6CB (Urine)	AMP, BZD, COC, MDMA, MOR/OPI, THC
830071	Drug-Screen-Cup 7CB (Urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC
830080	Drug-Screen-Cup 8CA (Urine)	AMP, BUP, BZD, COC, MOR/OPI, MTD, THC, TCA
830090	Drug-Screen-Cup 9CA (Urine)	AMP, BAR, BZD, COC, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC
830101	Drug-Screen-Cup 10CA (Urine)	AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC

nal von minden Drug-Screen® Urine Cup - No step Cup: Mode d'emploi et Interprétation

Mode d'emploi : No step Cup


- 1 Matériel fourni:
guide d'utilisation, test No step Cup avec couvercle et
étiquette de sécurité, échelle colorimétrique pour l'inter-
prétation des tests de falsification des urines.
- 2 Sortir le test de son emballage de protection.
Une fois ouvert, le test doit être réalisé dès
que possible.
- 3 Remplir le test No
test Cup avec l'urine
à tester. Refermer en
vissant le couvercle et
placer le test sur une
surface plane. Le test
débuté immédiate-
ment après l'addi-
tion de l'échantillon
d'urine.
- 4 Retirer le film
plastique pour
visualiser les
résultats du test
et l'apparition des
lignes colorées.
- 5 Lire le résultat
du test après 5
minutes. Ne plus
interpréter au-delà
10 minutes.



Interprétation des résultats


Négatif:

Deux lignes rouges apparaissent dans la
fenêtre de lecture. L'une représente la ligne
de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T)
spécifique à chaque drogue. Ce résultat négatif
indique que la quantité de drogue présente
dans cet échantillon est inférieure au seuil de
détection, voire totalement absente. L'inten-
sité de la ligne de test peut varier.

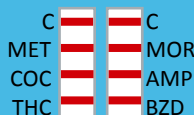


Positif:

Seule une ligne
rouge de contrôle
(C) apparaît et
aucune ligne
de test (T) n'est
visible.

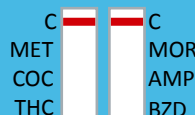

Positif

seulement
pour COC:
Dans cet
exemple, seul
le paramètre
COC est positif.

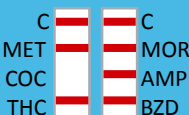

Non valide:


Aucune ligne
de
contrôle (C)
n'apparaît.





nal von minden Drug-Screen® Urin-Control-Stick-7

De nombreux patients essayent, à travers des moyens de falsification, de manipuler le résultat d'un test de drogues. Afin de détecter une possible falsification des urines, nal von minden vous propose d'utiliser les bandelettes Urin-Control-Stick-7. Ce test permet de vérifier 7 paramètres qui sont susceptibles d'influencer le résultat d'un test de dépistage de stupéfiants.

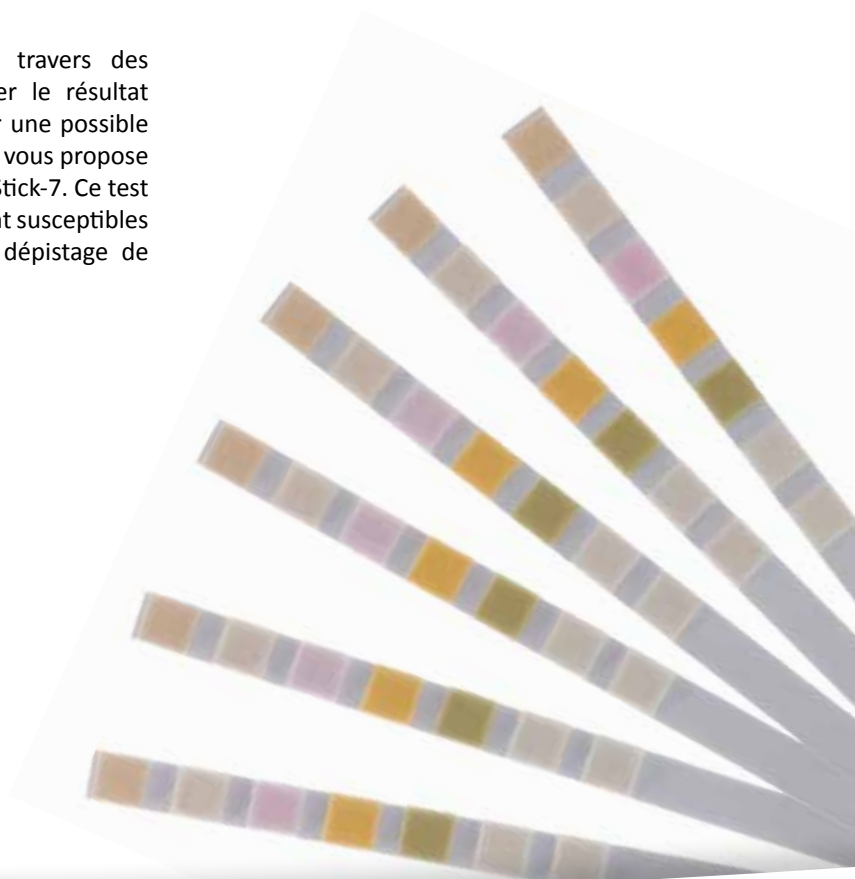

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Contrôle des urines falsifiées - Urin-control-stick-7



DOMAINE D'APPLICATION

Bandelettes contre la manipulation des résultats

L'Urin-Control-Stick-7 est un test rapide par absorption pour déterminer si un échantillon d'urine est dilué ou manipulé.

Ce test permet un examen préalable pour chaque dépistage de drogues.

Principes du test et réactions

pH	Détection de l'adultération avec des solutions acides ou basiques
Nitrite	Test d'ajout de nitrite
Densité	Test de dilution. Ce test se base sur une variation apparente du pKa de certains polyélectrolytes proportionnellement à la concentration ionique.
Créatinine	La concentration en créatinine est directement proportionnelle à l'intensité de la couleur de la zone réactive.
Glutaraldéhyde	Test d'ajout d'aldéhydes
Agents blanchissants	Test de détection d'agents blanchissants dans l'urine.
Chlorochromate de pyridinium	Test de détection de chlorochromate de pyridinium. La présence de chromate donne une coloration bleu-vert.

Possibilité de falsification	Action du patient	Observation
Dilution	Une dilution a été réalisée in vivo ou in vitro	L'urine est très claire. La température est inférieure à 33 ° C. La densité est inférieure à 1,01 g/ml. La concentration en créatinine est inférieure à 30 mg / dl.
Ajout d'une solution basique	Un agent oxydant (ex : Domestos®) a été ajouté à l'échantillon.	Le pH est supérieur à 8. Odeur de chlore détectable.
Ajout d'une solution acide	De l'acide acétique ou de l'acide citrique a été ajouté à l'échantillon.	Le pH est inférieur à 6. Odeur de vinaigre détectable.
Ajout d'autres substances	Du savon ou du sel a été ajouté à l'échantillon.	Présence de composé solide dans l'urine. La densité est d'environ 1,035 g/ml

Produit	Paramètre	Conditionnement	Référence
Urin-Control-Stick-7	7 Paramètres: Créatinine, pH, Glutaraldéhyde, Densité, Nitrite, Agents blanchissants et Chlorochromate pyridinium	Tube de 25 tests	630925
Thermomètre	32°C - 37°C	1 bandelette	124004



nal von minden
Drug-Screen®

Bandlettes
et Multi-
bandettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Tests salivaires

La salive est le prélèvement qui permet une détection de drogues conciliant rapidité, hygiène et respect de l'intimité du patient. De plus, il est pratiquement impossible de falsifier le résultat d'un test salivaire.

L'exécution des tests salivaires nal von minden Drug-Screen® avec un prélèvement de la salive est facile et le résultat du test est lisible en 10 minutes.

nal von minden Drug-Screen® Saliva Test Classic

Avantages et caractéristiques


- > Utilisation facile
- > Résultats précis en 10 minutes
- > Diminution des risques de falsification
- > Hautes sensibilité et spécificité grâce à la présence d'anticorps spécifiques
- > Ne nécessite pas de support électronique
- > Date de péremption de 18 mois minimum



- 1a**
- Maintenir le test à température ambiante. Sortir le test de son emballage et l'utiliser le plus rapidement possible.
 - Introduire l'éponge dans la bouche. Appliquer l'éponge pendant trois minutes entre la joue et la langue, jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée de salive. Exercer de légères pressions entre la langue et les dents pour faciliter l'absorption.
 - L'éponge entièrement imprégnée ne devrait plus présenter de parties dures.


Mode d'emploi: Saliva Test Classic

- 1b**
- Presser l'éponge contre la grille en plastique jusqu'à ce qu'il y ait le plus de salive possible dans le réservoir.
 - Retirer le collecteur.

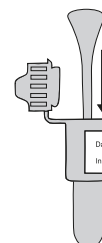

- 2**
- Refermer soigneusement le réservoir.

- 3**
- Déposer le test sur une surface propre et plane. Dévisser le couvercle du réservoir.
 - Le retourner et déposer 3 gouttes de salive (env. 100 µL) dans chaque puits de la cassette.

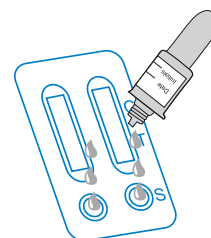


- 4**
- Attendre l'apparition des lignes colorées.
 - Lire le résultat au bout de 10 minutes.
 - Ne plus interpréter le résultat après 60 minutes.



10 minutes

- 5**
- Dans le cas d'un résultat équivoque, cacheter le réservoir avec l'étiquette argentée et l'envoyer au laboratoire.

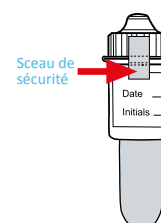

nal von minden Drug-Screen® Saliva Test Classic

Information

Les tests salivaires Drug-Screen résultent de la technique immunologique de dépistage de stupéfiants, basée sur les anticorps marqués à l'or spécialement développés pour le dépistage de drogues et de leurs métabolites.

Les tests salivaires Drug-Screen sont utilisés par la police, la douane, la médecine du travail, les cabinets médicaux et les cliniques spécialisées.

Les tests salivaires sont disponibles pour ces paramètres:

- Amphétamine
- Cannabis
- Cocaïne
- Méthamphétamine
- Méthadone
- Opiacés
- Phencyclidine
- Buprénorphine
- Benzodiazépine
- EDDP
- Oxycodon

Interprétation des résultats

Négatif:

Deux lignes rouges apparaissent dans la fenêtre de lecture. L'une représente la ligne de contrôle (C) et l'autre la ligne de test (T) spécifique à chaque drogue. Ce résultat négatif indique que la quantité de drogue présente dans cet échantillon est inférieure au seuil de détection, voire totalement absente. L'intensité de la ligne de test peut varier.



Positif:

Seule une ligne rouge de contrôle (C) apparaît et aucune ligne de test (T) n'est visible.



Positif seulement pour MET et AMP: dans cet exemple, seuls les paramètres MET et AMP sont positifs.



Non valide:

Aucune ligne de contrôle (C) n'apparaît.



Produit	Paramètre	Référence
Drug-Screen AMP50 cassette salivaire	AMP50	113001
Drug-Screen BUP5 cassette salivaire	BUP5	113004
Drug-Screen BZD10 cassette salivaire	BZD10	113003
Drug-Screen COC20 cassette salivaire	COC20	113005
Drug-Screen EDDP20 cassette salivaire	EDDP20	113021
Drug-Screen KET100 cassette salivaire	KET100	113024
Drug-Screen MET50 cassette salivaire	MET50	113007
Drug-Screen MTD30 cassette salivaire	MTD30	113006
Drug-Screen OPI40 cassette salivaire	MOR/OPI40	113009
Drug-Screen OXY20 cassette salivaire	OXY20	113032
Drug-Screen PCP10 cassette salivaire	PCP10	113011
Drug-Screen THC12 cassette salivaire	THC12	113012
Drug-Screen-Multi 2CA Saliva Test (classic)	AMP50, COC20	114023
Drug-Screen-Multi 3CA Saliva Test (classic)	AMP50, COC20, THC12	114053
Drug-Screen-Multi 3CB Saliva Test (classic)	COC20, MET50, THC12	114054
Drug-Screen-Multi 4CA Saliva Test (classic)	AMP50, COC20, MOR/OPI40, THC12	114040
Drug-Screen-Multi 5CA Saliva Test (classic)	AMP50, BZD10, COC20, MOR/OPI40, MTD30	114056
Drug-Screen-Multi 6CA Saliva Test (classic)	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12	114051
Drug-Screen-Multi 6CB Saliva Test (classic)	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, PCP10, THC12	114052
Drug-Screen-Multi 6CC Saliva Test (classic)	AMP50, BZD10, COC20, MOR/OPI40, MTD30, THC12	114060
Drug-Screen-Multi 7CA Saliva Test (classic)	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12	114070
Test salivaire personnalisé, jusqu'à 10 paramètres	Combinaison de 2 à 10 paramètres au choix	114XXX

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

nal von minden Drug-Screen® Saliva Test Advanced

Tests salivaires innovants et pratiques

- > Utilisation facile
- > Résultats précis en 10 minutes
- > Diminution des risques de falsification
- > Hautes sensibilité et spécificité grâce à la présence d'anticorps spécifiques
- > Ne nécessite pas de support électronique
- > Date de péremption de 18 mois minimum




- Maintenir le test à température ambiante. Sortir le test de son emballage et l'utiliser le plus rapidement possible. Introduire l'épongette dans la bouche. Appliquer l'épongette pendant trois minutes entre la joue et la langue, jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée de salive. Exercer de légères pressions entre la langue et les dents pour faciliter l'absorption. L'épongette entièrement imprégnée ne devrait plus présenter de parties dures.

Mode d'emploi: Saliva Test Advanced


2

Placer le lecteur à la verticale dans le bouchon bleu (= capsule de collecte) et le presser fermement vers le bas.

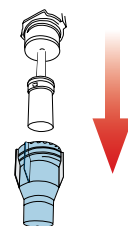

3

Faire tourner le bouchon bleu de 180°, dans le sens des aiguilles d'une montre en alignant la flèche rouge avec les marques blanches du bouchon.

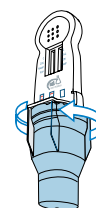

4

Placer horizontalement le test sur une surface propre et plane.



5


Lire les résultats au bout de 10 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 60 minutes.



10 minutes

6

En cas de résultat positif, refermer le bouchon avec un sceau de sécurité et envoyer le test dans un laboratoire d'analyse pour confirmation.

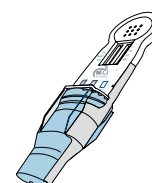

Produit	Paramètre	Référence
Drug-Screen-Multi 5A Saliva Advanced	COC20, THC12, MET50, OPI40, AMP50	116050

nal von minden Drug-Screen® Saliva Test Integrated

Tests salivaires innovants et pratiques

Les drogues présentes dans la salive entrent en compétition avec leurs conjugués de drogue pour la capture d'un anticorps spécifique.

Lors du test, la salive migre par capillarité. Si la drogue recherchée n'est pas présente dans la salive à une concentration supérieure à la valeur seuil du test, les sites de capture présents sur l'anticorps spécifique ne seront pas saturés par la drogue.


Le conjugué drogue-protéine réagit et une ligne colorée apparaît.




- 1 Maintenir le test à température ambiante. Sortir le test de son emballage et l'utiliser le plus rapidement possible. Introduire l'épongette dans la bouche. Appliquer l'épongette pendant trois minutes entre la joue et la langue, jusqu'à ce qu'elle soit imprégnée de salive. Exercer de légères pressions entre la langue et les dents pour faciliter l'absorption. L'épongette entièrement imprégnée ne devrait plus présenter de parties dures.

Mode d'emploi: Saliva Test Integrated

- 2 Poser le test sur une surface propre et plane et sortir l'éponge complètement imbibée de la bouche. Mettre l'éponge dans le collecteur correspondant. Faire tourner le collecteur avec le compartiment de l'éponge dans le sens des aiguilles d'une montre à 90°, jusqu'au clic. Attendre 1 minute.

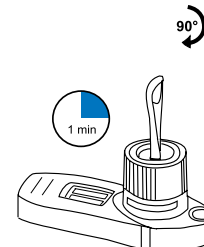

- 3 Après une minute, faire tourner le compartiment de l'éponge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et lancer le chronomètre.

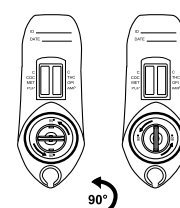


- 4 Lire le résultat dans les 9 minutes qui suivent. Après 20 minutes, ne plus lire le résultat.



après 9 minutes

- 5 Dans le cas d'un résultat positif, retirer l'éponge du compartiment en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Refermer le compartiment avec le couvercle et boucher le collecteur avec le sceau de sécurité. Envoyer le test à un laboratoire pour une analyse de confirmation. Le laboratoire peut atteindre l'échantillon par le bouchon sur la face avant du boîtier.

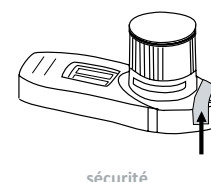

sécurité

Produit	Paramètre	Référence
Drug-Screen Saliva-6 GA (integrated)	COC20, THC12, MET50, MTD30, OPI40, AMP50	115051
Drug-Screen Saliva-6 GD (integrated)	COC20, MET50, BZD20, MTD30, OPI40, AMP50	115054

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services



nal von minden Drug-Screen® Tests de substances solides MMC

Nos tests Drug-Screen offrent la possibilité de passer au crible des substances suspectes (poudre, tablettes, liquides) afin d'en vérifier la nature exacte. Ce test en une seule étape est rapide et simple à effectuer, Il

permet de différencier plus de 50 substances, avec des résultats obtenus en quelques secondes.

Drug-Screen Tests de substances solides MMC

Les avantages des tests de surface:

- > Test en une seule étape
- > Sûr et facile d'utilisation
- > Ne contient pas de substance dangereuse
- > Aucun risque pour l'environnement
- > Longue conservation: jusqu'à 3 ans

Nos tests de reposent sur une réaction chimique par voie humide. Ils sont faciles d'utilisation et destinés à la détermination de stupéfiants sous forme de poudre, comprimé, résine ou liquide.

En ajoutant une petite quantité de la substance suspecte, les granulés contenus dans l'ampoule changent de couleur et la drogue (ou médicament) est alors identifiée.



nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie




Conseils et
services



Tests d'identification de drogues - MMC



Paramètre	Conditionnement	Référence
Test Cocaïne	10 Ampoules	310110
Spray Cocaïne	10 Ampoules + Spray	565027
Lingette de détection de Cocaïne	10 Lingettes	310270
Test LSD	10 Ampoules	310120
Test Cannabis	10 Ampoules	310130
Test Ecstasy et Méthamphétamine	10 Ampoules	310140
Test Valium et Rohypnol	10 Ampoules	310190
Test Méthadone	10 Ampoules	310180
Test Kétabine	10 Ampoules	310200
Test GHB (Gamma-Hydroxybutyrate liquide)	10 Ampoules	310150
Test Morphine & Héroïne	10 Ampoules	310210
Test Phencyclidine (PCP)	10 Ampoules	310320
Test Pentazocine	10 Ampoules	310160
Test Barbiturique	10 Ampoules	310390
Test BMP/PMK	10 Ampoules	310260
Test Buprénorphine	10 Ampoules	310220
Test Ephédrine	10 Ampoules	310240
Test Héroïne	10 Ampoules	310170
Test Cocaïne - olfactif	10 Ampoules	310111
Test mcPP (Chlorophenyl piperazine)	10 Ampoules	310332
Test Méthaqualone	10 Ampoules	310310
Test General Screening	10 Ampoules	310331
Test Oxycodon	10 Ampoules	310300
Test Opiacés & Amphétamine	10 Ampoules	310100
Test Psilocybine	10 Ampoules	310330
Test GBL	10 Ampoules	310250
Grand coffret: 180 ampoules + accessoires	180 Ampoules	310280
Petit coffret: 60 ampoules + accessoires	60 Ampoules	310290

Tests de substances solides : Mode d'emploi






Exécution du test ampoule

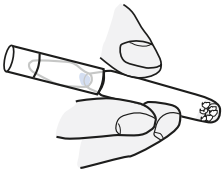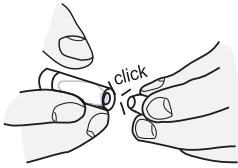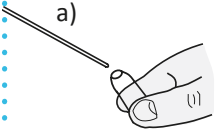- 1 Secouer l'ampoule et la tapoter légèrement contre une table ou une surface plane afin de faire tomber les cristaux vers le fond. 
- 2 Saisir l'ampoule entre le pouce et l'index et briser l'extrémité au niveau de la ligne (Par sécurité, laisser le capuchon en plastique sur la partie supérieure de l'ampoule). Ne pas renverser le contenu de l'ampoule. 
- 3 Ajouter la substance à tester (solide ou liquide)
 - a) Ajouter une petite quantité de substance dans l'ampoule à l'aide de la spatule ou
 - b) Ajouter une petite quantité de substance dans le capuchon en plastique (sans la partie supérieure de l'ampoule en verre).

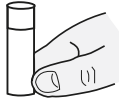
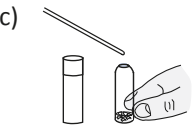

 - c) Pour les échantillons liquides, utiliser la pipette fournie pour ajouter une goutte de la substance à tester dans l'ampoule.

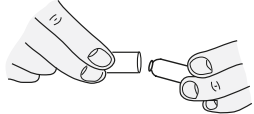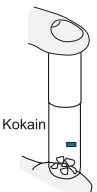- 4 Refermer l'ampoule avec le capuchon en plastique (sans la partie supérieure de l'ampoule en verre). Remarque : Pour les tests LSD, Cannabis et V/R, ajouter à l'aide de la spatule, la poudre complémentaire contenue dans le capuchon. 
- 5 Comparer la coloration des cristaux avec la couleur présente sur l'ampoule. 

Exécution du test spray Cocaïne

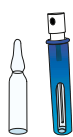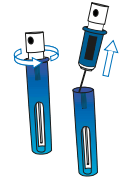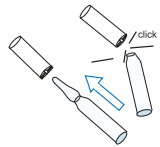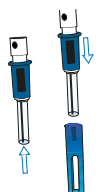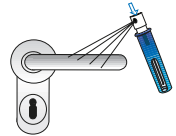- 1 Le kit contient:
 - un pulvérisateur
 - 1 ampoule
 - disponible en option: outil facilitant l'ouverture de l'ampoule
- 2 Dévisser le pulvérisateur au niveau du carré bleu et tirer le capuchon vers le haut. 
- 3 Afin d'ouvrir facilement l'ampoule, utiliser le petit outil disponible en option. Placer l'ampoule dans l'outil et briser l'embout. 
- 4 Placer le tuyau du pulvérisateur dans l'ampoule et replacer le pulvérisateur dans le tube bleu. 
- 5 Pulvériser le liquide par petites pressions sur la surface à tester. En présence de cocaïne, une couleur bleue apparaît sur la zone testée. 

Exécution du test Cocaïne Trace Wipe

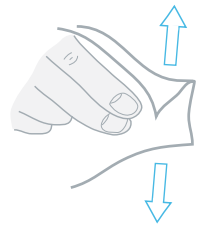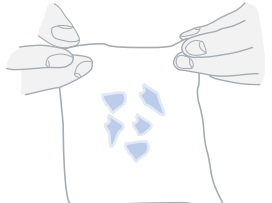- 1 Retirer la lingette de son emballage hermétique. Passer la lingette sur la zone à tester (textile, plastique, ...). 
- 2 La lingette se colore en bleu en présence de cocaïne. 



nal von minden Drug-Screen® Scanner RSS II

Le Drug-Screen Scanner RSS II permet de lire l'ensemble de nos tests Drug-screen urinaires sous format cassette, multi-cassette, multi-bandelette et urine cup II. En quelques minutes, il offre un diagnostic automatisé, une manipulation simplifiée et une bonne traçabilité des résultats.

Le Drug-Screen Scanner RSS II est un outil d'avenir dans le domaine des tests rapides de dépistage de stupéfiants.

En plus de nos tests rapides de dépistage de stupéfiants, d'autres tests rapides médicaux tels que nos tests de grossesse NADAL® peuvent être lu par le Drug-Screen Scanner RSS II. Le logiciel fourni avec le scanner est programmé et mis à jour avec les nouveaux tests souhaités.



nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Drug-Screen Scanner RSS II

Diagnostic rapide automatisé et traçabilité des résultats



Les points forts du Drug-Screen Scanner RSS II:

- > Manipulation simple et positionnement libre des tests
- > Analyse des tests en quelques secondes
- > Création d'un dossier patient personnalisé permettant un meilleur suivi
- > Service après-vente individualisé avec la création d'un compte client

Lecteur de tests rapides

Le Drug-Screen Scanner RSS II permet de lire l'ensemble de nos tests Drug-screen urinaires sous format cassette, multi-cassette et multi-bandelette.

La lecture du test est effectuée en quelques secondes et fournit un résultat fiable. Grâce à la nouvelle technologie « Intelligent Shape Detection (ISD) » permettant une reconnaissance de la forme et de la position du test, le test peut être lu dans chaque position. Les erreurs d'interprétation sont ainsi évitées.

Services utilisateurs

Le Drug-Screen Scanner RSS II trouve aisément sa place dans les hôpitaux et les laboratoires d'analyses médicales. Il peut également être utilisé par les autres acteurs du monde médical comme la médecine du travail, les cabinets médicaux, l'armée, les établissements de détention judiciaire et les douanes. Le Drug-Screen Scanner RSS II est un outil d'avenir dans le domaine des tests rapides de dépistage de stupéfiants.

Installation

Le Drug-Screen Scanner RSS II se connecte simplement au port USB de votre ordinateur et

fonctionne sur alimentation secteur. Après une rapide installation du logiciel, vous pouvez démarrer votre première analyse. Pour une utilisation autonome, l'appareil peut être complété par la station de travail RSS II qui comporte un PC intégré.

Analyse et archivage des résultats

Le Drug-Screen Scanner RSS II convainc par la précision des résultats mesurés, une manipulation simple et un archivage rapide et complet. Il est ainsi parfaitement adapté aux nouvelles exigences en matière de traçabilité des résultats.

Une fonction de recherche simple permet un accès rapide aux données déjà enregistrées. Les notes écrites manuellement ne sont plus nécessaires et vos analyses sont archivées en toute sécurité.

Importation et exportation des données

Avec une interface optionnelle, les données peuvent être transférées vers ou à partir d'un système informatique de gestion de laboratoire (LIMS). Le logiciel est capable de lire un code-barres et peut être relié à un LIMS via une interface. Le transfert de données peut être réglé au choix de façon uni- ou bidirectionnelle.

Drug-Screen Scanner RSS II


Caractéristiques et aperçus



Avant de l'appareil




Dos de l'appareil

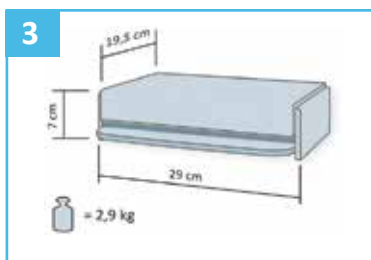

Dimensions et poids de l'appareil



Station de travail RSS II avec PC intégré

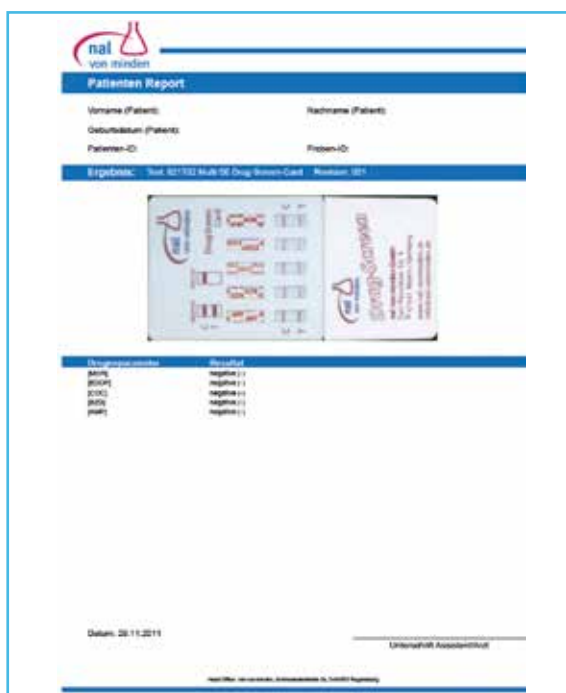

Exemple de présentation
du résultat de l'analyse



Cartographie de l'interface utilisateur

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services



nal von minden Drug-Screen® Tests d'alcoolémie

Les tests d'alcoolémie nal von minden Drug-Screen® utilisent une méthode simple et sûre pour détecter l'alcool dans la salive et l'urine. Grâce à une réaction

enzymatique, la zone de test se colore en fonction de la concentration d'éthanol à partir de 0,2% ou 20 mg/dL.






Caractéristiques:

- > Prix attractif et manipulation simple
- > Test en une seule étape
- > Conservation à température ambiante
- > Durée de péremption longue: 18 mois

Le test alcool urinaire est également intégrable à nos multi-tests Drug-screen.

Lecture du résultat

L'intensité de la couleur de la zone test doit être évaluée 2 minutes après le début du test.

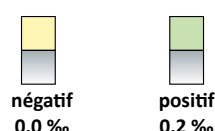

Mode d'emploi: Alcohol-Screen - Salive

- 1 Il est recommandé de ne pas manger, boire ou fumer dans les 20 minutes précédant le test.
- 2 Ouvrir l'emballage et prendre la bandelette sans toucher la zone de réaction située à l'extrémité du test. La zone de réaction doit être de couleur crème.
- 3 Déposer l'échantillon de salive directement sur la zone réactive ou tremper la bandelette dans le collecteur d'échantillon. Bien imbiber la zone réactive pendant environ 5-10 secondes. Commencer immédiatement à chronométrer. Attention : pour des raisons d'hygiène et de santé, il est déconseillé de mettre la bandelette directement dans la bouche.
- 4 Lire le résultat après 2 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 3 minutes.
- 5 Une valeur approximative du taux d'alcool dans le sang peut être déterminée en comparant la zone de réaction avec l'échelle colorimétrique. Nous recommandons cependant de n'utiliser ce test visuel que pour une analyse qualitative.

Mode d'emploi: Alcohol-Screen - Urine

- 1 Matériel nécessaire à la manipulation: bandelette, récipient contenant l'échantillon d'urine, gants.



- 2 Tremper la bandelette dans l'échantillon d'urine pendant 5-10 secondes.
- 3 Poser la bandelette sur une surface propre et plane.



- 4 Lire le résultat après 2 minutes. Ne plus interpréter les résultats après 3 minutes.



2 minutes

Produit	Cut-Offs	Référence	Conditionnement
Alcohol-Screen - Salive	0,2 ‰	360006	50
Alcohol-Screen - Urine	0,2 ‰	101036	50

Informations sur les stupéfiants et les médicaments

Paramètre	Nom commercial	Nom populaire	Effets
Alcool			Bien-être, variable selon l'humeur et la quantité consommée
Amphétamine	Aminorex®, Benzedrine® Isoméride®	Speed, Amphét	Euphorie, confiance en soi, excitation, tension artérielle élevée
Antidépresseurs tricycliques	Anafranil®, Saroten®, Aponal®	TCA	Analgesique, calmant
Barbiturique	Véronal®, Gardénal®, Pentothal®, Alepsal®, Kaneuron®	Barbs, Barbis, Downers	Diminution des facultés de jugement, vertiges, manque de motivation
Benzodiazépine	Valium®, Lexomil®, Seresta®, Téresta®, Traxene®	Benzos, Rohyps, Dias, Rohpies	Anxiolytique, calmant et relaxant
Buprénorphine	Subutex®, Temgésic®		Analgesique, soif réduite
Cannabis (THC)	Marinol®, Dronabinol®, Cesamet®	Joint, shit, herbe, haschisch, beuh	Sensation de bien-être, augmentation du rythme cardiaque
Cannabis synthétiques		Spice, encens, sel de bain	Sensation de bien-être
Cocaïne		Crack, coke	Euphorie immédiate, haute confiance en soi, pupille dilatée
Cotinine (métabolite de la nicotine)	Cigarette, Nicorette®	Clope	Absence d'effet (métabolite)
Ecstasy (MDMA)		XTC, Adam	Euphorie, sensation de bien-être et besoin de communiquer accru
EDDP (métabolite de la méthadone)			Absence d'effet (métabolite)
Ethylglucuronide			Absence d'effet (métabolite de l'alcool)
Fentanyl	Abstral®, Durogesic®, Matrifen®	China White, Fentora	Pupille dilatée et dépression respiratoire
Kétamine	Ketanest®, Ketalar®	Spezial K, Ket, Lady K, Kitty	Hallucination, salivation et pression artérielle accrue
LSD	Delysid®	Acide	Hallucination, salivation accrue et pupille dilatée
Métamphétamine	Pervitin®, Desoxyn®	Crystal, Ice	Euphorie, sensation de bien-être, de plaisir et de performance accrue
Méthadone	Methaddict®, L-Polamidon®	Po, Dollies, Juice	Réduit le besoin d'une nouvelle consommation, absence de troubles du sommeil
Méthqualone	Bendor®, Normilox®, Révonla®	Seven-one-fours, Seventeen Lemmon714	Aphrodisiaque, euphorie
Méthylphénidate	Ritalin®		Euphorie, performance et perception accrues
MDA (métabolite de la MDMA)		hug drug	Intensité émotionnelle accrue, hallucination et besoin de communiquer accru
Opiacé (ex : héroïne)	Capros®, Bronchicum mono®, Makatussin Codein®	Hero, came, poudre	Apaînement, euphorie et sensation d'extase
Oxycodon	Oxycotin LP®, Oxynorm®, Oxynormo®		Analgesique
Paracétamol	Doliprane®, Efferalgan®, Dafalgan®, HumexRhume®, Actifed®	PCM	Analgesique
Phencyclidine	Semyl®	Poudre d'ange, supergrass	Confusion, agressivité, troubles des fonctions motrices
Propoxyphène	Algafan®, Darvon®	Darvon	Soulage la douleur et dépression respiratoire
Tramadol	Contramal®, Ixprim®, Monoalgic®, Topalgic®, Zumalgic®	Tramal	Soulage la douleur, sédatif, nausée
Zolpidem	Ambien®, Ivadal®, Stilnox®		Apaînement, calmant

Temps de détection dans les urines au seuil standard*	Temps de détection dans le sang *	Temps de détection dans la salive *	Seuil de détection standard urinaire	Abréviation
Jusqu'à 12 heures			0,2‰	ALC
1 à 3 jours, selon valeur pH et quantité consommée	Jusqu'à 24 heures	Jusqu'à 72 heures	1000 ng/ml	AMP
2 à 3 jours			1000 ng/ml	TCA
1 jour (Barbiturique léger) à plusieurs semaines (Barbiturique fort)	1 heure à plusieurs jours		300 ng/ml	BAR
1 à 3 jours (Benzodiazépine léger) à plusieurs semaines (Benzodiazépine fort ou consommation chronique)	1 heure à plusieurs jours	Jusqu'à 24 heures	300 ng/ml	BZD
2 à 6 jours	1 à 3 jours (Pour chaque consommation)		10 ng/ml	BUP
Quelques heures (THC), 2-3 jours (THC-COOH), plusieurs semaines pour une consommation régulière	Quelques heures (THC), 1-2 jours (THC-COOH), plusieurs semaines pour une consommation régulière	Jusqu'à 14 heures (THC, une prise)	50 ng/ml	THC
1 à 3 jours			300 ng/ml	Spice
2 à 4 jours	Quelques heures (Cocaïne), jusqu'à 48 heures (Benzoylecgonin)	Jusqu'à 24 heures	300 ng/ml	COC
2 à 3 jours			200 ng/ml	COT
1 à 3 jours, selon valeur pH	Jusqu'à 24 heures		500 ng/ml	MDMA
2 à 7 jours			100 ng/ml	EDDP
1 à 3 jours	Plusieurs heures		300 ng/ml	EtG
1 à 2 jours			10 ng/ml	FYL
2 à 4 jours			1000 ng/ml	KET
2 à 4 jours	Jusqu'à 12 heures		20 ng/ml	LSD
1 à 3 jours, selon valeur pH et quantité consommée	Jusqu'à 24 heures	Jusqu'à 72 heures	1000 ng/ml	MET
1 à 7 jours		Jusqu'à 48 heures	300 ng/ml	MTD
3 à 7 jours			300 ng/ml	MQL
1 à 3 jours	Jusqu'à 6 heures		300 ng/ml	MPD
1 à 3 jours			500 ng/ml	MDA
2 à 4 jours	Quelques minutes (héroïne), quelques heures à 1 jour (morphine, codéine)	Plusieurs jours	300 ng/ml	MOR
1 à 3 jours			100 ng/ml	OXY
2 jours			5000 ng/ml	PCM
7 à 14 jours		Jusqu'à 24 heures	25 ng/ml	PCP
6 à 36 heures			300 ng/ml	PPX
1 à 3 jours			100 ng/ml	TML
1 à 2 jours	Quelques heures		50 ng/ml	ZOL

* Les temps de détection peuvent être influencés par plusieurs facteurs tels que la fréquence et la quantité de la substance consommée, le métabolisme du patient, la densité et le pH des urines. L'utilisation de seuils de détection différents des seuils standards peut raccourcir ou étendre le temps de détection.

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Conseils et services

Un service complet pour nos clients

Chez nal von minden nous plaçons la notion de service client au cœur de notre politique d'entreprise. En tant que partenaire à long terme, nous vous offrons un service complet, de la prise de contact à la livraison de votre commande et à son suivi.

✓ Service client

Une équipe de conseillers compétents et de biologistes qualifiés est à votre écoute pour toute demande d'information sur nos tests de diagnostic rapide. nal von minden vous assure un suivi client réactif, personnalisé et régulier.

✓ Large gamme de produit

Nous nous efforçons de vous proposer une gamme de tests de dépistage de stupéfiants la plus variée et la plus complète possible. Si vous recherchez un produit spécifique qui ne figure pas dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le nécessaire pour vous proposer une solution adaptée à vos besoins.

✓ Commande facile

Nos produits vous ont convaincu? Vous pouvez passer votre commande par téléphone, fax, courrier ou email. Un accusé vous sera envoyé par fax pour vous signaler la bonne réception et le traitement de votre commande.

✓ Longue conservation

Les tests Drug-screen peuvent être conservés dans leur emballage hermétique à température ambiante (2-30°C) pendant 18 mois minimum.

✓ Garantie d'échange

Si vos tests nal von minden Drug-Screen® urinaires sont arrivés à date de péremption, nous vous les échangeons gratuitement sur simple retour !

L'échange est valable pour les tests nal von minden Drug-Screen® urinaires bandelettes, multi-bandelettes, cassettes et multi-cassettes dans la limite d'une quantité maximum de 20% par produit commandé.

Bon de commande

Passez gratuitement votre commande par fax :

France : 0800 909 493	Belgique : 0800 718 82	Luxembourg : 800 211 16	Suisse: 0800 837 476
-----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

Adresse de facturation	
Dénomination sociale	
Adresse	
Code postal - Ville - Pays	
Contact	
Téléphone / Fax	
N° TVA Intracommunautaire	

Adresse de livraison si différente	
Dénomination sociale	
Adresse	
Code postal - Ville - Pays	

Référence	Produit	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Montant total HT				

Remarques	Cachet	Date	Signature

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Notes personnelles

nal von minden
Drug-Screen®

Bandelettes
et Multi-
bandelettes

Cassettes
et Multi-
cassettes

Tests
sanguins

Urine cup

Contrôle des
urines falsifiées

Tests
salivaires

Tests de
substances
solides

Drug-Screen
Scanner RSS II

Tests
d'alcoolémie

Conseils et
services

Contact

Notre équipe francophone se tient à votre disposition pour toute question ou information sur nos tests. N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone



Numéros verts

France
0800 915 240
Belgique
0800 718 82

Luxembourg
800 211 16
Suisse
0800 564 720

Par fax



Fax gratuits

France
0800 909 493
Belgique
0800 747 07

Luxembourg
800 261 79
Suisse
0800 837 476

Internet

Commandez directement sur notre site internet: www.nal-vonminden.com

ou par mail: dept.ventes@nal-vonminden.com



www.nal-vonminden.de/fr



dept.ventes@nal-vonminden.com

Découvrez nos gammes de tests sur notre site

Tous les produits, ainsi que les nouveautés sur:

www.nal-vonminden.fr



nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 12
47445 Moers
Allemagne

Friedenstrasse 32
93053 Regensburg
Allemagne

n° Vert: 0800 915 240
n° Fax: 0800 909 493

dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Directeur général:
Sandra von Minden
Roland Meißner
Thomas Zander

Registre du commerce Kleve:
HRB 5679
N° SIRET: 52181233900013
N° TVA: DE 189 016 086

Crédit Agricole Strasbourg
Code banque 17206
Code guichet 00048
N°63003740733 / Clé 59

Tests rapides

Produits de laboratoire

A propos de nous